

PROTOCOLE D'ENVOI D'ÉCHANTILLONS DE SELLES POUR

**Recherche de virus entériques dans le cadre  
d'un protocole de transplantation de flore**

**Recueil et conservation de l'échantillon :**

- Un échantillon de selles par patient doit être recueilli dans un flacon stérile. Mentionner sur le flacon l'identité et la date de naissance du patient ainsi que la date de prélèvement.
- En attendant la prise en charge du colis par un transporteur, conserver l'échantillon à 4°C. **En cas d'envoi différé de plus de 48h, conserver l'échantillon à - 20°C.**


**Réalisation du colis :**

- **L'échantillon doit être envoyé dans un triple emballage conforme à la réglementation en vigueur pour le transport des échantillons cliniques (arrêté ADR\*) :**
  - ✓ Déposer le flacon (*réceptif primaire*), entouré de papier absorbant, dans un sachet plastique ou une boîte rigide (plastique, métallique...) à fermeture hermétique (*emballage secondaire*), puis dans une boîte en carton ou polystyrène (*emballage extérieur*), avec interposition de matières de rembourrage appropriées.
  - ✓ **Joindre impérativement la fiche individuelle de renseignements (en page 2) dûment remplie.**
  - ✓ Apposer sur la surface extérieure du colis la désignation « Matière Biologique, catégorie B » près de la mention UN 3373 dans un losange (à découper ci-dessous).

**Conditions d'envoi :**

- Le colis doit être acheminé **dans un délai de 24h par transporteur spécialisé dans la collecte d'échantillons biologiques (à température ambiante ou à +4°C).**
- Pour éviter un délai d'acheminement trop long, il est conseillé d'effectuer l'envoi en début ou en milieu de semaine (réception au laboratoire tous les jours sauf le dimanche).
- Expédier le colis à l'adresse suivante :

Centre National de Référence Virus des Gastro-entérites  
CHU Dijon Bourgogne  
Laboratoire de Biologie et Pathologie  
Plateforme de Biologie Hospitalo-Universitaire  
2 rue Angélique Ducoudray  
BP 37013  
21070 DIJON CEDEX

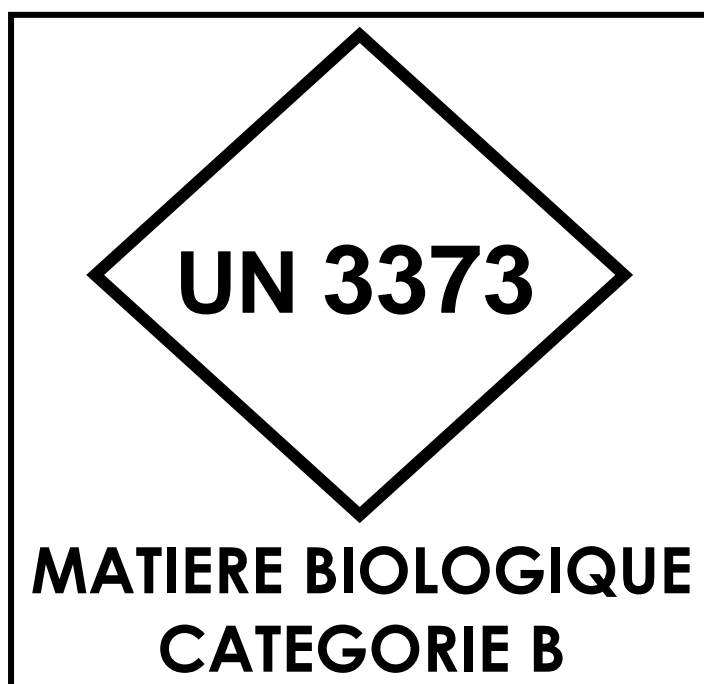

\* Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1<sup>er</sup> juin 2001 relatif au transport des matières infectieuses de classe 6.2 : instructions ADR P650 (par route) ou IATA 650 (par air).

**FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS**  
**A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À TOUT PRÉLÈVEMENT**

**Recherche de virus entériques dans le cadre  
d'un protocole de transplantation de flore**

**LABORATOIRE EXPEDITEUR**

Raison sociale : .....

Adresse : ..... Tél : \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_

CP : \_\_\_\_ Ville : ..... Fax : \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_

Adresse mail sécurisée pour l'envoi des comptes rendus (mssante ou apicrypt) :

**PRESCRIPTEUR**

NOM Prénom : .....

Adresse : ..... Tél : \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_

CP : \_\_\_\_ Ville : ..... Fax : \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_ / \_\_

Adresse mail sécurisée pour l'envoi des comptes rendus (mssante ou apicrypt) :

**DONNEUR**

Nom usuel : ..... Nom de naissance : .....

Prénom: ..... Sexe :  F  M

ou Identifiant (si personne anonyme) : .....

Date de naissance : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ N° de sécurité sociale : \_ \_ \_ \_ \_

Nature du prélèvement : Selles prélevées le \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ à \_\_ h \_\_

**ANALYSES A REALISER**

Norovirus, sapovirus, adénovirus, rotavirus, astrovirus, entérovirus, VHA et VHE sont les agents infectieux à dépister dans les selles des donneurs selon les recommandations de l'ANSM du 07 avril 2025.

- Panel standard :
  - Norovirus       Sapovirus       Adénovirus       Rotavirus       Astrovirus
- Peuvent être ajoutées uniquement si une ou plusieurs analyses du panel standard sont demandées :
  - Entérovirus       VHA       VHE
- Non obligatoire selon les recommandations de l'ANSM, mais réalisée à la demande :
  - Virus Aichi

**OBSERVATIONS / COMMENTAIRES**